



Phosphorus

COVID-19 RT-qPCR Test: at-home Ordering Guide

At-Home Collection Guide

For Prescription, In Vitro Diagnostic and Emergency Use Authorization ONLY

Ordering Note

A COVID-19 RT-qPCR Test order requires you to complete a detailed COVID-19 Medical Questionnaire that is reviewed by an independent provider. A portion of your fee goes to this independent physician for reviewing your test request.

Please follow collection instructions carefully to ensure an adequate specimen is collected for testing.

This product has not been FDA cleared or approved but has been authorized by FDA under an EUA for use by authorized laboratories. This product has been authorized only for the detection of nucleic acid from SARS-CoV-2, not for any other viruses or pathogens; and, this product is only authorized for the duration of the declaration that circumstances exist justifying the authorization of emergency use of in vitro diagnostics for detection and/or diagnosis of COVID-19 under Section 564(b)(1) of the Federal Food, Drug and Cosmetic Act, 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1), unless the declaration is terminated or authorization is revoked sooner.

1



Please visit our website ([COVID-19 RT-qPCR Test](#)) to request and pay for your test and related service fees. You must be 18 years or older to use this product.

2



You will be emailed a link to an online COVID-19 Medical Questionnaire to complete. A healthcare provider will authenticate the information, review and assess necessity for testing.

3



Once your test request has been approved, you will receive notification that your at-home saliva collection kit has shipped to your address.

4



Complete sample collection and return the specimen back to the Phosphorus Diagnostics laboratory via a prepaid FedEx Return Shipment Pack.

5



Once ready, you and your ordering healthcare provider will receive a notification via email with instructions for obtaining your results. You may choose to follow-up with your provider.

Please visit phosphorus.com/covid-19 to learn more about COVID-19 and what Phosphorus is doing to increase testing availability during this global pandemic.



Phosphorus

At-Home Collection Guide

For Prescription, In Vitro Diagnostic and Emergency Use Authorization ONLY

Collection Kit Contents



Phosphorus Kit Box



Prepaid FedEx Return Shipment Pack



Biohazard Bag



Absorbent Pouch



DNA Genotek OGD-510 Saliva Collection Device

For sample collection tube

Patient First & Last Name
Date of Birth (mm/dd/yy)
Collection Date and Time (EST):

Sticky Notes for Sample Labeling

Pre-populated Test Requisition Form



This At-Home Patient Collection Guide



Sample Collection Instructions


Collection Note

Do NOT eat, drink (including water), smoke, or chew gum for 30 minutes before giving a saliva sample.

To ensure timely receipt of intact specimen, be sure to drop your packet with FedEx the same day that you collect your sample. Your sample must be received within 56 hours of specimen collection.


Instructions for Collecting and Returning Saliva Specimen

1

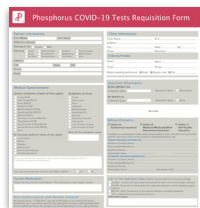

Wash hands thoroughly for 20 seconds with soap upon receipt of package. Confirm that the information on your pre-populated test requisition form is correct.

2

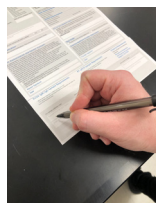

Read and sign the test authorization and consent on the pre-populated requisition form to be returned.

3



Write your name, date of birth and date/time of specimen collection on two sticky notes. Place one on the sample collection tube; place the other in a space provided on the requisition form.

4




Wash your hands thoroughly for 20 seconds with soap. Follow the instructions provided with the saliva collection device. After collecting your sample, wash your hands again thoroughly for 20 seconds with soap.

5




Place the filled sample tube into absorbent pouch and then with signed requisition form into the biohazard bag and seal the bag. Press firmly along closure to securely zip. Wash your hands thoroughly for 20 seconds with soap after placing sample in the biohazard bag. Place the biohazard bag in the Phosphorus kit box.

6

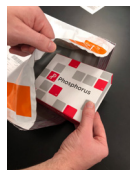

Wash your hands thoroughly for 20 seconds with soap before placing the Phosphorus box within the prepaid UN3373 FedEx Return Shipment Pack. Drop the package at the nearest FedEx store or call 1.800.463.3339 to schedule a same day pickup.

7

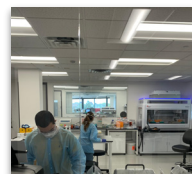

Your sample will be shipped to the Phosphorus Diagnostics laboratory in Secaucus, NJ, and results will be available within 72 hours. Your results will be sent directly to you. A copy of your results will also be sent to your provider.

8








You will have the option to talk to a physician should you have any questions about your results.

Questions about collecting your specimen? Please get in touch.


To view video guided instructions on collection, please visit: <https://www.youtube.com/watch?v=ql2dc39nZ94&feature=youtu.be>
To view a copy of the collection instructions, please visit: <https://www.dnagenotek.com/US/support/collection-instructions/oragene-dx/OGD-510andOGD-610.html>

Phosphorus | support@phosphorus.com | phosphorus.com

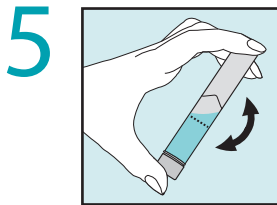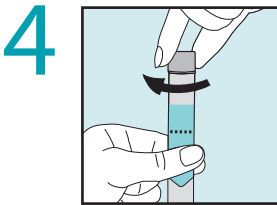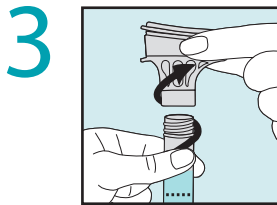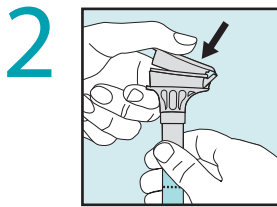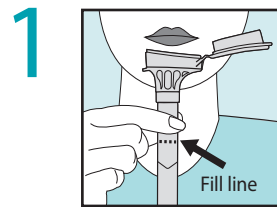

DNAgenotek

Made in Canada
DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2
Tel.: +1.613.723.5757
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

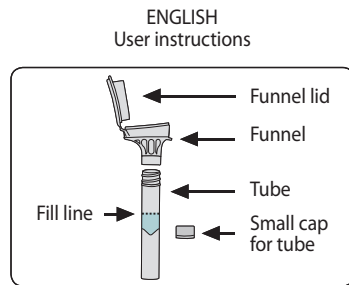

Read all instructions
prior to collection.

Intended use: For the collection of human DNA from saliva samples.

Contents: Kit contains stabilizing liquid.

Warnings and precautions: Rx only. Wash with water if stabilizing liquid comes in contact with eyes or skin. Do NOT ingest. See MSDS at www.dnagenotek.com.

Small cap may pose a choking hazard.

Storage: 15°C / 30°C

Summary and explanation of the kit:

Oragene-Dx is a self-collection kit that provides the materials and instructions for collecting and stabilizing saliva specimens.

Collection precautions:

Do NOT eat, drink, smoke or chew gum for 30 minutes before giving your saliva sample.

Do NOT remove the plastic film from the funnel lid.

Procedure:

Most people take between 2 and 5 minutes to deliver a saliva sample following steps 1 to 5.

1 Spit into funnel until the amount of liquid saliva (not bubbles) reaches the fill line shown in picture #1.

2 Hold the tube upright with one hand. Close the funnel lid with the other hand (as shown) by firmly pushing the lid until you hear a loud click. The liquid in the lid will be released into the tube to mix with the saliva. Make sure that the lid is closed tightly.


3 Hold the tube upright. Unscrew the funnel from the tube.

4 Use the small cap to close the tube tightly.

5 Shake the capped tube for 5 seconds. Discard the funnel.

Label legend:

- Consult package insert
- Collect saliva by (Use by)
- In vitro diagnostic medical device
- Catalog number
- CE Marking
- Caution, consult instructions for use
- Storage instructions
- Authorized Representative
- Manufacturer
- Lot number

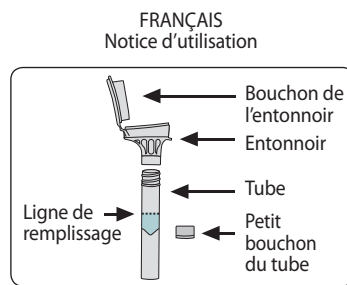

Lire la notice
avant le prélèvement.

Application : Pour le prélèvement d'ADN humain à partir d'échantillons salivaires.

Contenu : Le kit contient du liquide stabilisateur.

Avertissements et précautions : Rincer à l'eau en cas de contact du liquide stabilisateur avec les yeux ou la peau. Ne pas ingérer. Consulter la fiche signalétique sur le site www.dnagenotek.com.

Bouchon de petite taille, danger de suffocation.

Conservation : 15 °C / 30 °C

Résumé et explication du kit :

Oragene-Dx est un kit d'auto-prélèvement qui fournit les matériaux et les instructions pour le prélèvement et la stabilisation des échantillons salivaires.

Précautions de prélèvement :

Ne PAS manger, boire, fumer ni mâcher du chewing-gum dans les 30 minutes précédant le prélèvement de l'échantillon salivaire.

Ne PAS retirer le film plastique du bouchon de l'entonnoir.

Procédure :

Le prélèvement d'un échantillon salivaire prend en général entre deux et cinq minutes en suivant les étapes 1 à 5.

1 Cracher dans l'entonnoir jusqu'à ce que la salive (et non les bulles) atteigne la ligne de remplissage indiquée sur l'image N°1.

2 D'une main, tenir le tube à la verticale. De l'autre, fermer le bouchon (comme indiqué) en le poussant fermement jusqu'à ce qu'un claquement fort se fasse entendre. Le liquide se trouvant dans le bouchon est libéré dans le tube et se mélange à la salive. S'assurer que le bouchon est bien fermé.


3 Tenir le tube à la verticale. Dévisser l'entonnoir du tube.

4 Utiliser le petit bouchon pour fermer hermétiquement le tube.

5 Agiter le tube fermé pendant 5 secondes. Jeter l'entonnoir.

Légende de l'étiquette :

- Consulter la notice
- Prélever la salive avant le (utiliser avant le)
- Dispositif médical de diagnostic in vitro
- Numéro de référence catalogue
- Marquage CE
- Attention, consulter la notice d'utilisation
- Instructions de stockage
- Représentant agréé
- Fabricant
- Numéro de lot

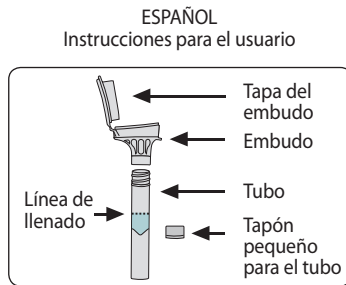

Lea todas las instrucciones
antes de la recolección.

Uso previsto: Para la recolección de ADN humano de muestras de saliva.

Contenido: El kit contiene líquido estabilizador.

Advertencias y precauciones: Enjuague con agua si el líquido estabilizador entra en contacto con los ojos o la piel. No lo ingiera. Consulte la hoja de datos de seguridad del material (MSDS) en www.dnagenotek.com.

Tapón pequeño, peligro de asfixia.

Almacenamiento: 15 °C / 30 °C

Resumen y explicación del kit:

Oragene-Dx es un kit de autorrecolección que contiene los materiales y las instrucciones para recolectar y estabilizar muestras de saliva.

Precauciones para la recolección:

NO ingiera alimentos ni bebidas, no fume ni mastique goma de mascar 30 minutos antes de obtener su muestra de saliva.

NO quite la película plástica de la tapa del embudo.

Procedimiento:

A la mayoría de las personas les lleva entre 2 y 5 minutos proporcionar una muestra de saliva siguiendo los pasos 1 a 5.

1 Escupa hasta que la cantidad de saliva líquida (no de burbujas) alcance la línea de llenado que se muestra en la figura n.º 1.

2 Sostenga el tubo en posición vertical con una mano. Cierre la tapa con la otra mano (como se muestra), empujándola con firmeza hasta que escuche un chasquido fuerte. El líquido de la tapa pasará al tubo para mezclarse con la saliva. Asegúrese de que la tapa esté correctamente cerrada.


3 Sostenga el tubo en posición vertical. Desenrosque el embudo del tubo.

4 Utilice el tapón pequeño para cerrar el tubo herméticamente.

5 Agite el tubo tapado durante 5 segundos. Deseche el embudo.

Leyenda de la etiqueta:

- Consulte el prospecto del paquete
- Recoja la saliva antes del (fecha de caducidad)
- Dispositivo médico para diagnóstico in vitro
- Número de catálogo
- Marca CE
- Precaución: consulte las instrucciones de uso
- Instrucciones de almacenamiento
- Representante autorizado
- Fabricante
- Número de lote

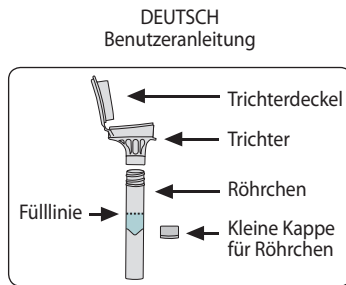

Vor der Probenahme alle
Anweisungen lesen.

Verwendungszweck: Für die Entnahme von menschlicher DNS aus Speichelproben.

Inhalt: Kit enthält Stabilisierungsflüssigkeit.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen: Mit den Augen oder der Haut in Kontakt gekommene Stabilisierungsflüssigkeit mit Wasser abwaschen. Nicht verschlucken. Siehe MSDS (Sicherheitshinweise für den Umgang mit gefährlichen Substanzen) unter www.dnagenotek.com.

Kleine Kappe, Erstickungsgefahr.

Lagerung: 15 °C / 30 °C

Zusammenfassung und Erläuterung des Kits:

Oragene-Dx ist ein Selbstentnahme-Kit, das die Materialien und Anweisungen zur Entnahme und Stabilisierung von Speichelproben enthält.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Probenahme:

Für 30 Minuten vor der Entnahme der Speichelprobe NICHT essen, trinken, rauchen oder Kaugummi kauen.

NICHT die Kunststoffolie vom Trichterdeckel entfernen.

Verfahren: Bei den meisten Personen dauert die Abgabe der Speichelprobe nach Schritt 1 bis 5 zwischen 2 und 5 Minuten.

1 Solange spucken, bis die Menge des flüssigen Speichels (ohne Luftbläschen) die in Bild 1 gezeigte Fülllinie erreicht.

2 Das Röhrchen mit einer Hand aufrecht halten. Mit der anderen Hand den Deckel schließen (wie abgebildet), indem der Deckel fest angedrückt wird, bis ein lautes Klicken zu hören ist. Die Flüssigkeit im Deckel wird in das Röhrchen freigegeben und vermischt sich mit dem Speichel. Sicherstellen, dass der Deckel fest verschlossen ist.


3 Das Röhrchen aufrecht halten. Den Trichter vom Röhrchen abschrauben.

4 Das Röhrchen mit der kleinen Kappe fest verschließen.

5 Das verschlossene Röhrchen 5 Sekunden lang schütteln. Den Trichter entsorgen.

Etikettenlegende:

- Packungsbeilage beachten
- Speichelentnahme bis (Verwendbar bis)
- Medizinisches In-vitro-Diagnosegerät
- Katalognummer
- CE-Kennzeichnung
- Achtung, Gebrauchsanweisung lesen
- Lagervorschriften
- Autorisierter Vertreter
- Hersteller
- Losnummer

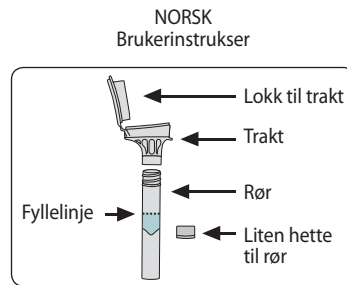

Les alle instruksjoner
før innsamling.

Beregnet bruk: Til oppsamling av menneskelig DNA fra spyttprøver.

Innhold: Settett inneholder stabiliserende væske.

Advarsler og forholdsregler: Vask med vann dersom stabiliseringsvæsken kommer i kontakt med øyne eller hud. Må ikke inntas. Se MSDS på www.dnagenotek.com.

Liten hette, kvelningsfare.

Lagring: 15 °C / 30 °C

Oppsummering og forklarling til settet:

Oragene-Dx er et sett for trygg oppsamling som gir deg materiell og instruksur for å samle opp og stabilisere spyttprøver.

Forholdsregler ved innsamling:

IKKE spis, drikk, røyk eller tygg tygggummi de siste 30 minuttene før spyttprøve avgis.

IKKE fjern plastfilmen fra traktlokket.

Fremgangsmåte:

De fleste trenger mellom 2 og 5 minutter for å avgi en spyttprøve iht. trinn 1 til 5.

1 Spytt til mengden av flytende spytt (ikke bobler) når opp til fylinjen som vises i bilde nr. 1.

2 Hold røret loddrett med en hånd. Lukk traktlokket med den andre hånden (som vist) ved å trykke hardt til det høres et høyt klikk. Væsken i lokket vil renne inn i røret og blandes med spyttet. Forsikre deg om at lokket sitter tett.


3 Hold røret loddrett. Skru røret løst fra trakten.

4 Bruk et lite lokk til å tette røret helt.

5 Ryst det tette røret i 5 sekunder. Trakten avhendes.

Etikettmerking:

- Se pakkevedlegg
- Ta spyttprøver før (bruk før)
- In vitro diagnostisk medisinsk enhet
- Katalognummer
- CE-merking
- Forsiktig, se brukerinstruksjoner
- Instruksjoner for lagring
- Autorisert representant
- Produsent
- Partinummer

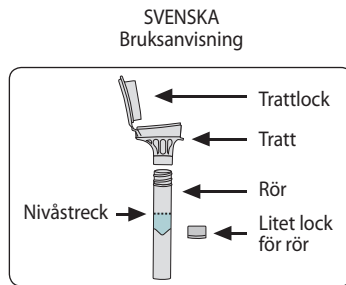

Läs hela anvisningen
innan provet avgis.

Användningsområde: För insamling av mänsklig DNA från salivprov.

Innehåll: Satsen innehåller stabiliserende stabiliseringsvätska.

Varningar och försiktighetsåtgärder: Tvätta med vatten om stabiliseringsvätskan kommer i kontakt med ögon eller hud. Må ikke indtages. Se säkerhetsdatablad på adressen www.dnagenotek.com.

Litet lock, kvävningsrisk.

Förvaring: 15°C / 30°C

Sammanfattning och förklarling av satsen:

Oragene-Dx är en sats för egenprovtagning med material och anvisningar för insamling och stabilisering av salivprover.

Försiktighetsåtgärder vid insamling:

Vänta minst 30 min efter att du ätit, druckit, rökt eller tuggat tuggummi innan du avger provet.

Ta INTE bort plastfilmen från trattlokket.

Procedur:

För de flesta personer tar det mellan 2 och 5 minuter att avge ett salivprov enligt punkterna 1 till 5.

1 Spotta tills mängden salivvätska (utan bubblor) når upp till nivåstrecket som visas i figur 1.

2 Håll røret upprätt med ena handen. Stäng trattlokket med den andra handen (enligt figur) genom att trycka till så att ett skarpt klick hörs. Vätskan i locket kommer att släppas ned i røret och blandas med saliven. Se till att locket sluter tätt.


3 Håll røret upprätt. Skruva loss tratten från røret.

4 Sätt på locket så att det sluter tätt mot rørets öppning.

5 Skaka det tillslutna røret i 5 sekunder. Kasta munstycket i soporna.

Symbolförklaringar:

- Se bilaga i förpackningen
- Samla saliv senast (använd före)
- In vitro medicinteknisk produkt avsedd för diagnostik
- Katalognummer
- CE-märkning
- Varning, se bruksvejledningen
- Opbevaringsvejledning
- Anvisning för förvaring
- Behörig representant
- Tillverkare
- Referensnummer

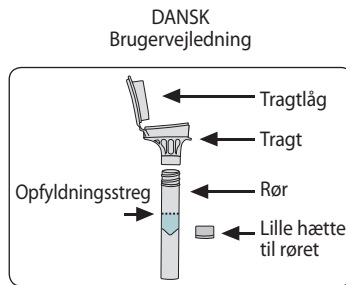

Læs alle vejledninger
inden indsamling.

Tilsigtet anvendelse: Til indsamling af menneskelig DNA fra spyttprøver.

Indhold: Sættet indeholder stabiliserende væske.

Advarsler og forholdsregler: Skyl med vand hvis den stabiliserende væske kommer i kontakt med øjne eller hud. Må ikke indtages. Se Sikkerhedsdatablad på www.dnagenotek.com.

Lille hætte, kvælningsfare.

Opbevaring: 15 °C / 30 °C

Resumé og forklaring af sættet:

Oragene-Dx er et sæt til selv-indsamling, der leverer materialerne og vejledningen til at indsamle og stabilisere spyttprøver.

Forholdsregler ved indsamling:

UNDLAD at spise, drikke, ryge eller tygg tygggummi i 30 minutter inden afgivelse af spyttprøven.

Fjern IKKE plastfilmen fra tragtens låg.

Procedure:

De fleste personer er mellem 2 og 5 minutter om at komme med en spyttprøve, når de følger trin 1 til 5.

1 Spyt ind i tragtens indtil mængden af flydende spyt (uden bobler) når "opfyldningslinjen" vist på billede #1.

2 Hold røret lodret med en hånd. Luk låget med den anden hånd (som vist) ved at trykke fast ned på låget, indtil du hører et højt klik. Væsken i låget vil blive frigjort ind i røret og vil blande sig med spyttet. Sørg for, at låget er lukket tæt.

3 Hold røret lodret. Skru tragtens af røret.

4 Brug den lille hætte til at lukke røret tæt til.


5 Ryst røret med hæften påsat i 5 sekunder. Kassér tragtens.




For collection of human DNA

For In Vitro Diagnostic Use
Rx only


1

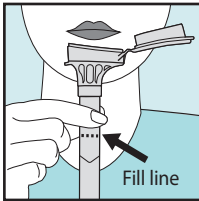


2

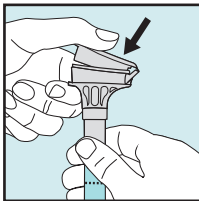


3

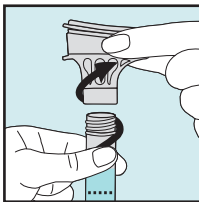

4

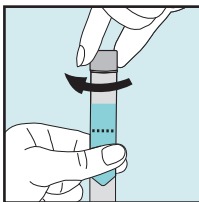

5

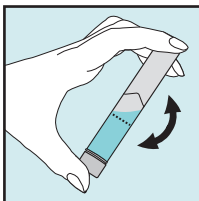

REF OGD-500 and OGD-510
REF OGD-600 and OGD-610

CE


Emergo Europe
Prinsesgracht 20, 2514 AP The Hague
The Netherlands

© 2017 DNA Genotek Inc.,
a subsidiary of OraSure Technologies, Inc.,
all rights reserved.

Superior samples
Proven performance

CE

NEDERLANDS
Gebruiksaanwijzing

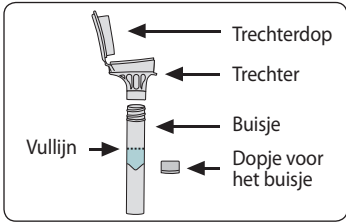

Lees vóór de afname
alle instructies.

Beoogd gebruik: Voor het verzamelen van
menselijk DNA uit speekselmonsters.

Inhoud: Kit bevat stabilisatievloeistof.

Waarschuwingen en voorzorgen: Met water
spoelen indien de stabilisatievloeistof met de
ogen of huid in contact komt. Niet inslikken.
Raadpleeg MSDS op www.dnagenotek.com.

Kleine dop, verstikkingsgevaar.

Opslag: 15°C / 30°C

Samenvatting en toelichting op de kit:

ORAgene-Dx is een zelfverzamelingsset die de
materialen en instructies bevat voor het verzamelen
en stabiliseren van speekselmonsters.

Voorzorgen bij afname:

**Voordat u uw speekselmonster afstaat mag
u 30 minuten daarvoor NIET eten, drinken,
roken of kauwgom kauwen.**

**De dunne plastic film NIET van de trechterdop
verwijderen.**

Procedure:

Bij de meeste mensen duurt het tussen 2 en
5 minuten om een speekselmonster te geven
volgens stappen 1 t/m 5.

1 Spuw in de trechter totdat de hoeveelheid
speekselvloeistof (geen belletjes) de in
afbeelding 1 getoonde vullijn (fill line) bereikt.

2 Houd het buisje met de ene hand rechtop.
Sluit met de andere hand het buisje af met
de dop (zoals afgebeeld) door stevig op de
dop te drukken totdat u een luide klik hoort.
De vloeistof in de dop loopt het buisje in
en mengt zich met het speeksel. Zorg ervoor
dat de dop stevig gesloten is.

3 Houd het buisje rechtop. Schroef de trechter
van het buisje af.


4 Gebruik het dopje om het buisje stevig
te sluiten.

5 Schud het buisje met het dopje erop
gedurende 5 seconden. Gooi de trechter weg.

Labelopschrift:

	Raadpleeg de bijsluiter in de verpakking
	Verzamel speeksel niet later dan (Gebruik niet later dan)
	Medisch hulpmiddel voor in vitro diagnostiek
	Catalogusnummer
	CE-markering
	Voorzichtig, raadpleeg vóór gebruik de instructies
	Opslaginstructies
	Erkende vertegenwoordiger
	Fabrikant
	Lotnummer

ITALIANO
Istruzioni per l'uso

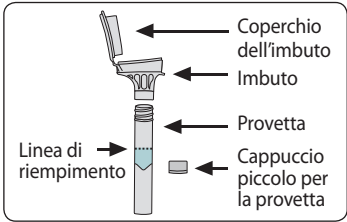

Prima della raccolta,
leggere tutte le istruzioni.

Uso previsto: Per il prelievo di DNA umano da
campioni di saliva.

Contenuto: il kit contiene liquido di
stabilizzazione.

Avvertenze e precauzioni: Se il liquido di
stabilizzazione viene a contatto con occhi o
pelle, risciacquare con acqua. Non ingerire.
Vedere la scheda di sicurezza riportata su
www.dnagenotek.com.

Cappuccio piccolo, pericolo di soffocamento.

Conservazione: 15 °C / 30 °C

Riassunto e spiegazione del kit:

ORAgene-Dx è un kit di autoprelievo che fornisce
i materiali e le istruzioni per il prelievo e la
stabilizzazione di campioni di saliva.

Precauzioni per il prelievo:

**NON mangiare, bere, fumare o masticare
chewing-gum nei 30 minuti precedenti il
prelievo del campione di saliva.**

**NON rimuovere la pellicola di plastica dal
coperchio dell'imbuto.**

Procedimento:

Per la maggior parte delle persone, sono solitamente
necessari da 2 a 5 minuti per raccogliere un
campione di saliva seguendo i passaggi da 1 a 5.

1 Espellere saliva nell'imbuto finché la quantità
di saliva liquida (senza bolle) raggiunge la
linea di riempimento mostrata nella figura n. 1.

2 Tenere la provetta verticalmente con una mano.
Chiudere il coperchio dell'imbuto con l'altra
mano come mostrato, premendo il coperchio
con decisione fino a sentire chiaramente uno
scatto. Il liquido presente nel coperchio verrà
rilasciato nella provetta, mescolandosi con la
saliva. Assicurarsi che il coperchio sia chiuso
ermeticamente.

3 Tenere la provetta verticalmente. Svitare la
provetta dall'imbuto.


4 Chiudere ermeticamente la provetta utilizzando
il cappuccio piccolo.

5 Agitare la provetta con il cappuccio inserito
per 5 secondi. Rimuovere la carta dall'imbuto.

Legenda dell'etichetta:

	Consultare il foglietto illustrativo allegato alla confezione
	Raccogliere la saliva entro (Usare entro)
	Dispositivo medico diagnostico in vitro
	Numero di catalogo
	CE
	Attenzione, consultare le istruzioni per l'uso
	Istruzioni per la conservazione
	Rappresentante autorizzato
	Produttore
	Numero di lotto

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Οδηγίες για τον χρήστη

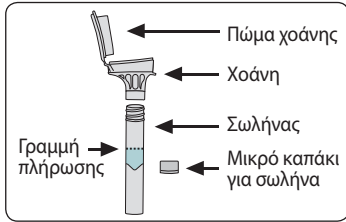

Διαβάστε όλες τις
οδηγίες πριν τη συλλογή.

Ενδεικνυόμενη χρήση: Για τη συλλογή
ανθρώπινου DNA από δείγματα σάλιου.

Περιεχόμενα: Το kit περιέχει σταθεροποιητικό
υγρό.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις:
Ξεπλύνετε με νερό εάν το σταθεροποιητικό
υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα.
Μην καταπίνετε. Ανατρέξτε στο ΦΔΑΥ,
στη διεύθυνση www.dnagenotek.com.

Μικρό καπάκι, κίνδυνος πνιγμού.

Αποθήκευση: 15°C / 30°C

Σύνοψη και επεξήγηση του kit:

Το ORAgene-Dx είναι ένα kit ατομικής συλλογής
που παρέχει τα απαραίτητα υλικά και οδηγίες για
τη συλλογή και σταθεροποίηση δειγμάτων σάλιου.

Προφυλάξεις για τη συλλογή:

**ΜΗΝ τρώτε, πίνετε, καπνίζετε ή μασάτε τσίκλα
για 30 λεπτά πριν τη χορήγηση του δείγματος
του σάλιου σας.**

**ΜΗΝ αφαιρείτε το πλαστικό φιλμ από το πώμα
της χοάνης.**

Διαδικασία:

Για τους περισσότερους ανθρώπους απαιτούνται
περίπου 2 έως 5 λεπτά για τη χορήγηση ενός
δείγματος σάλιου ακολουθώντας τα βήματα
1 έως 5.

1 Πτύστε μέσα στη χοάνη, έως όπου η στάθμη του
υγρού σάλιου (όχι οι φυσαλίδες) να φτάσει στη
γραμμή πλήρωσης που φαίνεται στην εικόνα 1.

2 Κρατήστε όρθιο τον σωλήνα με το ένα χέρι.
Κλείστε το πώμα της χοάνης με το άλλο χέρι
(όπως απεικονίζεται) πιέζοντας σταθερά το
πώμα έως όπου ακούσετε ένα δυνατό «κλικ».
Το υγρό στο πώμα θα απελευθερωθεί εντός
του σωλήνα και θα αναμειχθεί με το σάλιο.
Βεβαιωθείτε ότι το πώμα έχει κλείσει καλά.

3 Κρατήστε όρθιο τον σωλήνα. Ξεβιδώστε το
χωνί από το σωλήνα.


4 Χρησιμοποιήστε το μικρό καπάκι για να
κλείσετε καλά τον σωλήνα.

5 Ανακινήστε τον κλεισμένο σωλήνα για
5 δευτερόλεπτα. Απορρίψτε τη χοάνη.

Επεξήγηση ετικέτας:

	Ανατρέξτε στο ένθετο της συσκευασίας
	Συλλέξτε το σάλιο έως (Ημ/νία λήξης)
	Ιατρική συσκευή διαγνωστικής χρήσης in vitro
	Αριθμός καταλόγου
	Ένδειξη CE
	Προσοχή, συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
	Οδηγίες αποθήκευσης
	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος
	Κατασκευαστής
	Αριθμός παρτίδας

PORTUGUÊS
Instruções para o utilizador

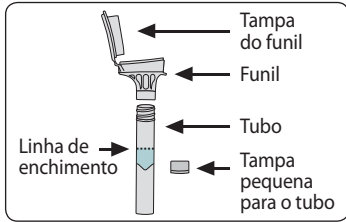

Leia todas as instruções
antes da recolha.

Fim a que se destina: Para a recolha de ADN
humano a partir de amostras de saliva.

Conteúdo: O kit contém líquido estabilizador.

Avisos e precauções: Se o líquido estabilizador
entrar em contacto com os olhos ou a pele,
enxagüe. Não ingira. Ver a ficha de dados de
segurança em www.dnagenotek.com.

Tampa pequena, risco de asfixia.

Armazenamento: 15°C / 30°C

Sumário e explicação do kit:

ORAgene-Dx é um kit de auto-recolha que
fornece os materiais e instruções para a recolha
e estabilização de amostras de saliva.

Precauções para a recolha:

**NÃO coma, não beba, não fume e não masque
pastilha elástica durante os 30 minutos que
antecedem a recolha da amostra de saliva.**

NÃO retire a película da tampa do funil.

Procedimento:

A maioria das pessoas demora entre 2 e 5 minutos
a produzir a amostra de saliva, seguindo os passos
1 a 5.

1 Deite a saliva no funil até a quantidade
de líquido (sem bolhas) alcançar o nível de
enchimento na figura nº 1.

2 Mantenha o tubo direito com uma mão. Feche
a tampa com a outra mão (tal como ilustrado)
empurrando-a com firmeza até ouvir
nitidamente um clique. O líquido na tampa
solta-se para dentro do tubo para se misturar
com a saliva. Assure-se de que a tampa fica
bem fechada.

3 Mantenha o tubo direito. Desenrosque o funil
do tubo.


4 Use a tampa pequena para fechar bem o tubo.

5 Agite o tubo fechado com a tampa durante
5 segundos. Eliminar o funil.

Legenda da etiqueta:

	Consultar a literatura inclusa na embalagem
	Recolher saliva até (Utilizar até)
	Dispositivo médico de diagnóstico "in vitro"
	Número de catálogo
	Marca CE
	Atenção: consultar as instruções de utilização
	Instruções de armazenamento
	Representante autorizado
	Fabricante
	Número de lote

PORTUGUÊS – Brasil
Instruções de uso

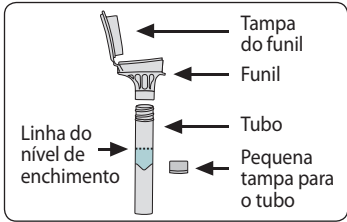

Leia todas as instruções
antes da coleta.

Aplicação: Para a coleta de DNA humano em
amostras de saliva.

Conteúdo: O kit contém líquido estabilizante.

Avisos e precauções: Se o líquido estabilizante
entrar em contato com a pele ou com os olhos,
lave-os com água. Não ingerir. Veja MSDS em
www.dnagenotek.com.

Tampa pequena, perigo de asfixia.

Armazenamento: 15°C / 30°C

Resumo e explicação do kit:

ORAgene-Dx é um kit de auto-coleta que
proporciona os materiais e as instruções para a
coleta e estabilização de espécimes de saliva.

Precauções durante a coleta:

**NÃO coma, beba, fume ou masque chiclete por
30 minutos antes de fornecer a amostra de saliva.**

NÃO remova o filme plástico da tampa do funil.

Procedimento:

A maioria das pessoas leva de 2 a 5 minutos para
fornecer uma amostra de saliva seguindo as
etapas 1 a 5.

1 Cuspa no funil até a quantidade de saliva
líquida (não as bolhas) alcançar o nível de
enchimento exibido na figura nº 1.

2 Segure o tubo na vertical com uma mão. Feche
a tampa com a outra mão (conforme mostrado)
empurrando a tampa firmemente até ouvir um
forte estalo. O líquido na tampa será liberado
no tubo para se misturar à saliva. Certifique-se
de que a tampa está completamente fechada.

3 Segure o tubo na vertical. Desenrosque o funil
do tubo.


4 Use a tampa pequena para fechar o tubo.

5 Agite o tubo tampado por 5 segundos.
Descarte o funil.

Legenda de embalagem:

	Consulte o guia da embalagem
	Coletar a saliva até (usar até)
	Dispositivo médico de diagnóstico in-vitro
	Número de catálogo
	Marcação CE
	Cuidado, consulte instruções de uso
	Instruções de armazenamento
	Representante autorizado
	Fabricante
	Número de lote

中文
使用说明

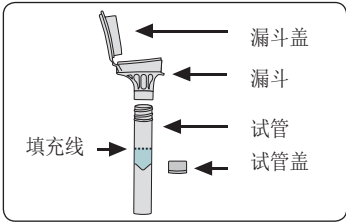

采集前，
请阅读所有说明。

指定用途：从唾液样本搜集人类 DNA。

内容：工具包中含有稳定液体。

警告和预防措施：如果稳定液体接触到您的
眼睛或皮肤，请用清水清洗干净。切勿吞食。
请登陆 www.dnagenotek.com 查阅化学品安
全技术说明书 (MSDS)。

小盖子，哽塞危险。

储存：15°C 至 30°C

工具包的概述和说明：

ORAgene-Dx，使用自采集试剂盒，试剂盒
中含有采集和稳定唾液样本需要的材料
和说明。

采集注意事项：

切勿在采集唾液样品前 30 分钟内进食、
饮水、吸烟或嚼口香糖。

切勿去除漏斗盖上的塑料膜。

步骤：

遵循步骤 1 至 5，大多数人需要花费
2 至 5 分钟的时间来完成唾液样本采集。

1 将唾液吐进漏斗，直至液体唾液 (而非
气泡) 量达到图 #1 所示的填充线高度。

2 单手持试管，令其处于直立状态。
另一只手用力按压盖子 (如图所示)，
将盖子盖紧，直到听见响亮的咔嚓声。
盖子中的液体将流入试管，同唾液
混合。确保盖子盖紧。

3 保持试管处于直立状态。从试管上拧
下漏斗。


4 使用小盖子盖紧试管。

5 摇晃加盖的试管 5 秒钟。丢弃或回收
处理漏斗。

标签文字说明：

	查阅包装内的说明书
	唾液采集方式 (有效期)
	体外诊断医疗设备
	目录号
	CE 标志
	注意，请参阅使用说明
	存储说明
	获授权代表
	制造商
	批号

日本語
使用方法

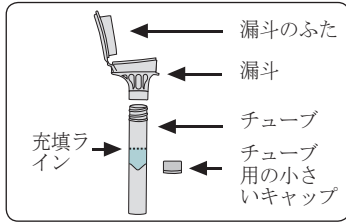

採取の前に、使用上の注意を必
ずすべてお読みください。

使用目的：唾液サンプルのヒトDNA採取用。

内容物：キットには安定液が含まれています。

警告および注意：安定液が目に入ったり
皮膚に接触した場合は、水で洗い流してく
ださい。体内に摂取しないでください。
www.dnagenotek.com で製品安全データシート
をご確認ください。

小さいキャップ、のどに詰まる危険性あり

保管：15°C / 30°C

キットの概要および説明：

ORAgene-Dx，唾液検体の採取と安定化のため
の用具と説明書が含まれている自己採取用キ
ットです。

採取における注意事項：

唾液のサンプルを採取する30分前から、飲食、
喫煙、ガムを噛むことは控えてください。

漏斗のふたからプラスチックフィルムを取り
除かないでください。

手順：

ほとんどの方は、以下の1～5の手順に従っ
て唾液のサンプルを採取するのに2～5分か
ります。

1 図1に示されている充填ラインに達する
まで漏斗内に唾液 (唾液ではなく) を吐
きます。

2 チューブを片手で真っ直ぐに立てて保持
します。もう一方の手で漏斗のふたを
しっかりと押し下げて閉めます (図を参
照)。カチッという音がします。 ふたの
液がチューブの唾液の中に流れます。
ふたがしっかりと閉まっていることを確認
します。

3 チューブを真っ直ぐに立てて保持し。
試験管から漏斗をねじって外します。

4 小さなキャップでチューブをしっかりと密
封します。

5 キャップで密封したチューブを5秒間振
ります。 漏斗は破棄します。

ラベルの説明：

	パッケージ同封物を参照してください
	唾液採取期限 (使用期限)
	インビトロ診断用医療器具
	カタログ番号
	CEマーキング
	注意、使用方法については使用上の注意をご覧ください
	保管方法の説明
	正規代理店
	製造者
	製造番号